


分析日期 : 2024/10/11 15:46:15
样品名 : -36
样品 ID :
数据文件 : D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\3\ -36. qgd
原始数据文件 : D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\ -36. qgd
方法文件 : D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇. qgm
原始方法文件 : D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇. qgm
报告文件 :

样品信息

色谱图 -36 D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\3\ -36. qgd

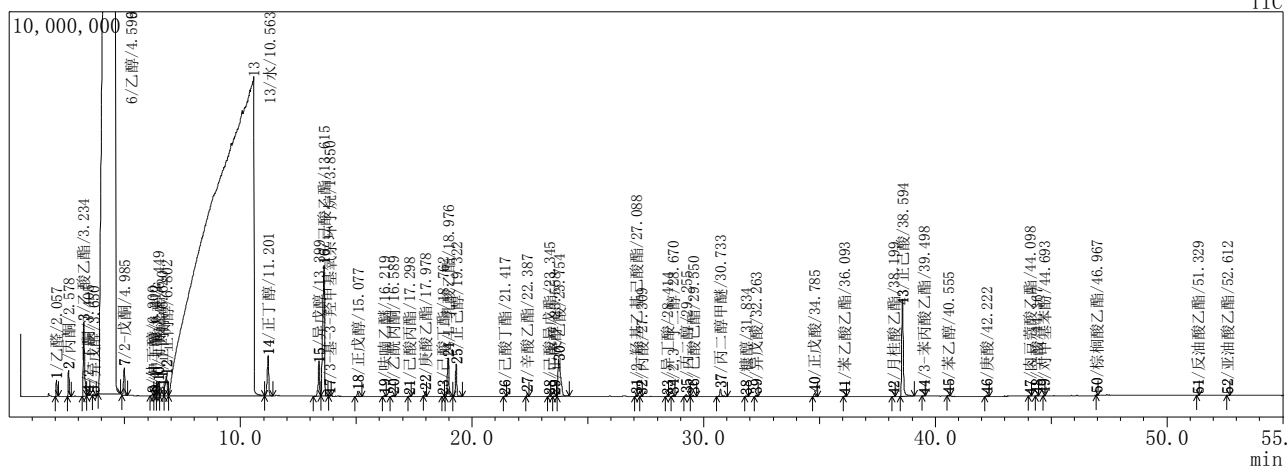

| 峰表 TIC | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|---------|------------|---------|----------|------------|----------------|--|
| 峰号 | 保留时间 | I. Time | F. Time | 峰面积 | 峰面积% | 峰高 | CAS# | 名称 | |
| 1 | 2.057 | 2.015 | 2.145 | 1091802 | 0.0598 | 430698 | 75-07-0 | 乙醛 | |
| 2 | 2.578 | 2.520 | 2.705 | 2018417 | 0.1106 | 673507 | 67-64-1 | 丙酮 | |
| 3 | 3.234 | 3.175 | 3.355 | 7176877 | 0.3931 | 1915778 | 141-78-6 | 乙酸乙酯 | |
| 4 | 3.405 | 3.355 | 3.495 | 248676 | 0.0136 | 55211 | 78-93-3 | 2-丁酮 | |
| 5 | 3.650 | 3.600 | 3.765 | 176330 | 0.0097 | 43605 | 590-86-3 | 异戊醛 | |
| 6 | 4.599 | 3.865 | 4.835 | 717776071 | 39.3132 | 25567111 | 64-17-5 | 乙醇 | |
| 7 | 4.985 | 4.890 | 5.130 | 2709386 | 0.1484 | 698206 | 107-87-9 | 2-戊酮 | |
| 8 | 6.200 | 6.100 | 6.260 | 245198 | 0.0134 | 40324 | 78-92-2 | 仲丁醇 | |
| 9 | 6.312 | 6.260 | 6.380 | 302176 | 0.0166 | 64229 | 78-92-2 | 仲丁醇 | |
| 10 | 6.449 | 6.380 | 6.520 | 1183833 | 0.0648 | 351069 | 105-54-4 | 丁酸乙酯 | |
| 11 | 6.620 | 6.520 | 6.690 | 1653486 | 0.0906 | 225734 | 71-23-8 | 正丙醇 | |
| 12 | 6.802 | 6.690 | 6.900 | 3489341 | 0.1911 | 512937 | 71-23-8 | 正丙醇 | |
| 13 | 10.563 | 6.900 | 11.050 | 1028654652 | 56.3402 | 8209019 | 7732-18-5 | 水 | |
| 14 | 11.201 | 11.050 | 11.400 | 4681315 | 0.2564 | 993489 | 71-36-3 | 正丁醇 | |
| 15 | 13.399 | 13.150 | 13.475 | 3780986 | 0.2071 | 877349 | 123-51-3 | 异戊醇 | |
| 16 | 13.615 | 13.475 | 13.775 | 18907498 | 1.0356 | 3277350 | 123-66-0 | 己酸乙酯 | |
| 17 | 13.850 | 13.795 | 13.915 | 61802 | 0.0034 | 18763 | 0-00-0 | 3-基-3-羟甲基氧杂环丁烷 | |
| 18 | 15.077 | 14.950 | 15.250 | 466743 | 0.0256 | 123159 | 71-41-0 | 正戊醇 | |
| 19 | 16.219 | 16.125 | 16.295 | 88143 | 0.0048 | 24380 | 65330-49-6 | 呋喃乙醚 | |
| 20 | 16.589 | 16.470 | 16.685 | 123715 | 0.0068 | 27010 | 123-54-6 | 乙酰丙酮 | |
| 21 | 17.298 | 17.245 | 17.365 | 54914 | 0.0030 | 16900 | 626-77-7 | 己酸丙酯 | |
| 22 | 17.978 | 17.905 | 18.045 | 412843 | 0.0226 | 122642 | 106-30-9 | 庚酸乙酯 | |
| 23 | 18.762 | 18.710 | 18.820 | 22777 | 0.0012 | 6243 | 626-82-4 | 己酸丁酯 | |
| 24 | 18.976 | 18.825 | 19.175 | 4709925 | 0.2580 | 972419 | 687-47-8 | L-乳酸乙酯 | |
| 25 | 19.322 | 19.175 | 19.575 | 3263780 | 0.1788 | 804587 | 111-27-3 | 正己醇 | |
| 26 | 21.417 | 21.355 | 21.500 | 75260 | 0.0041 | 21746 | 626-82-4 | 己酸丁酯 | |
| 27 | 22.387 | 22.310 | 22.465 | 250158 | 0.0137 | 73372 | 106-32-1 | 辛酸乙酯 | |
| 28 | 23.345 | 23.250 | 23.400 | 66295 | 0.0036 | 16766 | 2198-61-0 | 己酸异戊酯 | |
| 29 | 23.558 | 23.485 | 23.655 | 37102 | 0.0020 | 8722 | 111-70-6 | 正庚醇 | |
| 30 | 23.754 | 23.675 | 24.200 | 7439015 | 0.4074 | 951146 | 64-19-7 | 乙酸 | |
| 31 | 27.088 | 27.015 | 27.140 | 134607 | 0.0074 | 37519 | 25601-36-9 | 2-羟基乙基己酸酯 | |
| 32 | 27.309 | 27.240 | 27.355 | 42042 | 0.0023 | 8865 | 79-09-4 | 丙酸 | |
| 33 | 28.414 | 28.345 | 28.475 | 36907 | 0.0020 | 9562 | 79-31-2 | 异丁酸 | |
| 34 | 28.670 | 28.590 | 28.765 | 101038 | 0.0055 | 22607 | 513-85-9 | 2,3-丁二醇 | |
| 35 | 29.255 | 29.150 | 29.425 | 248106 | 0.0136 | 39998 | 57-55-6 | 丙二醇 | |
| 36 | 29.550 | 29.425 | 29.700 | 103953 | 0.0057 | 22141 | 6378-65-0 | 己酸己酯 | |
| 37 | 30.733 | 30.550 | 31.025 | 884633 | 0.0485 | 175967 | 107-92-6 | 丙二醇甲醚 | |
| 38 | 31.834 | 31.775 | 31.925 | 53706 | 0.0029 | 12219 | 98-00-0 | 糠醇 | |
| 39 | 32.263 | 32.175 | 32.345 | 116249 | 0.0064 | 26750 | 503-74-2 | 异戊酸 | |
| 40 | 34.785 | 34.690 | 34.910 | 337530 | 0.0185 | 77462 | 109-52-4 | 正戊酸 | |
| 41 | 36.093 | 36.025 | 36.175 | 62014 | 0.0034 | 16485 | 101-97-3 | 苯乙酸乙酯 | |
| 42 | 38.199 | 38.140 | 38.260 | 18449 | 0.0010 | 7208 | 106-33-2 | 月桂酸乙酯 | |
| 43 | 38.594 | 38.475 | 39.100 | 12042314 | 0.6596 | 2395811 | 142-62-1 | 正己酸 | |
| 44 | 39.498 | 39.430 | 39.555 | 31579 | 0.0017 | 9750 | 2021-28-5 | 3-苯甲酸乙酯 | |
| 45 | 40.555 | 40.495 | 40.630 | 71197 | 0.0039 | 19289 | 60-12-8 | 苯乙醇 | |
| 46 | 42.222 | 42.130 | 42.340 | 131541 | 0.0072 | 34853 | 111-14-8 | 庚酸 | |
| 47 | 44.098 | 44.025 | 44.150 | 18928 | 0.0010 | 7692 | 124-06-1 | 肉豆蔻酸乙酯 | |
| 48 | 44.367 | 44.315 | 44.450 | 52686 | 0.0029 | 23856 | 124-07-2 | 辛酸 | |
| 49 | 44.693 | 44.650 | 44.735 | 21625 | 0.0012 | 10994 | 106-44-5 | 对甲基苯酚 | |

| 峰号 | 保留时间 | I. Time | F. Time | 峰面积 | 峰面积% | 峰高 | CAS# | 名称 |
|----|--------|---------|---------|------------|----------|----------|-----------|-------|
| 50 | 46.967 | 46.930 | 47.020 | 67219 | 0.0037 | 30246 | 628-97-7 | 棕榈酸乙酯 |
| 51 | 51.329 | 51.270 | 51.385 | 19563 | 0.0011 | 7425 | 6114-18-7 | 反油酸乙酯 |
| 52 | 52.612 | 52.580 | 52.730 | 26094 | 0.0014 | 6771 | 544-35-4 | 亚油酸乙酯 |
| | | | | 1825790496 | 100.0000 | 50126941 | | |