

分析日期 : 2024/10/11 09:34:27

样品名 : -31

样品 ID :

数据文件 : D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\3\ -31. qgd

原始数据文件 : D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\ -31. qgd


方法文件 : D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇. qgm

原始方法文件 : D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇. qgm

报告文件 :

样品信息

色谱图 -31 D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\3\ -31. qgd

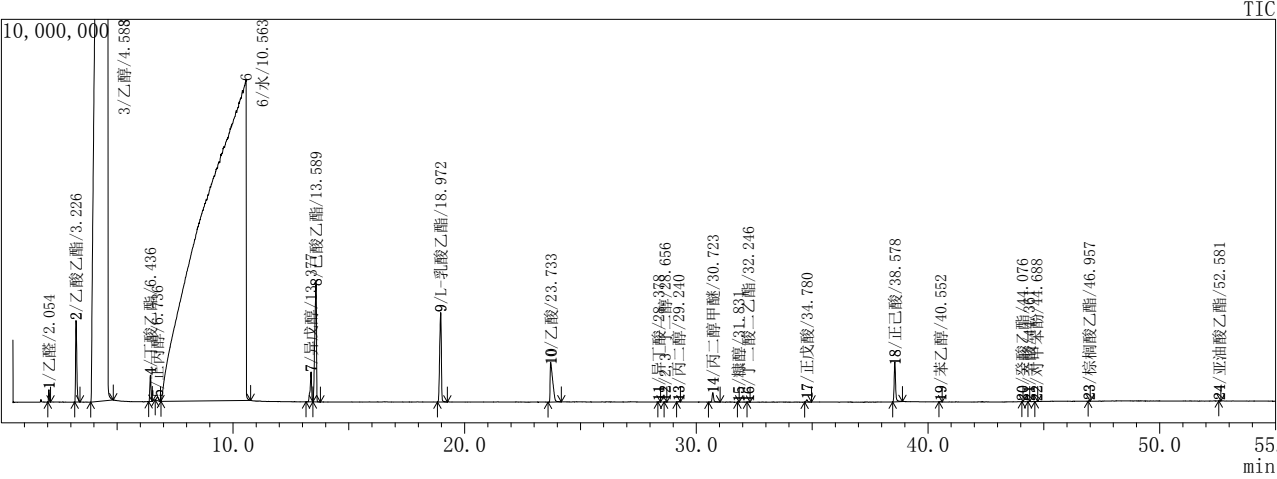

峰表 TIC									
峰号	保留时间	I. Time	F. Time	峰面积	峰面积%	峰高	CAS#	名称	
1	2.054	2.010	2.125	818972	0.0452	322015	75-07-0	乙醛	
2	3.226	3.165	3.395	7827698	0.4320	2119298	141-78-6	乙酸乙酯	
3	4.588	3.860	4.830	714392527	39.4257	25482719	64-17-5	乙醇	
4	6.436	6.360	6.520	2394478	0.1321	689605	105-54-4	丁酸乙酯	
5	6.736	6.645	6.870	537499	0.0297	90979	71-23-8	正丙醇	
6	10.563	6.895	10.760	1041221385	57.4627	8341858	7732-18-5	水	
7	13.377	13.150	13.450	3453278	0.1906	742547	123-51-3	异戊醇	
8	13.589	13.450	13.775	15531178	0.8571	2873516	123-66-0	己酸乙酯	
9	18.972	18.825	19.250	11782796	0.6503	2287236	687-47-8	L-乳酸乙酯	
10	23.733	23.600	24.175	7938839	0.4381	1022245	64-19-7	乙酸	
11	28.378	28.340	28.460	31223	0.0017	7704	79-31-2	异丁酸	
12	28.656	28.610	28.725	22774	0.0013	6315	513-85-9	2,3-丁二醇	
13	29.240	29.145	29.315	34217	0.0019	7220	57-55-6	丙二醇	
14	30.723	30.525	31.025	1128845	0.0623	238303	107-92-6	丙二醇甲醚	
15	31.831	31.775	31.850	9581	0.0005	3326	98-00-0	糠醇	
16	32.246	32.190	32.320	26707	0.0015	5794	123-25-1	丁二酸二乙酯	
17	34.780	34.675	34.975	261688	0.0144	57206	109-52-4	正戊酸	
18	38.578	38.475	38.900	4462032	0.2462	997298	142-62-1	正己酸	
19	40.552	40.475	40.610	29394	0.0016	6736	60-12-8	苯乙醇	
20	44.076	44.050	44.100	5427	0.0003	3213	110-38-3	癸酸乙酯	
21	44.361	44.315	44.390	12717	0.0007	5027	124-07-2	辛酸	
22	44.688	44.610	44.735	19062	0.0011	3908	106-44-5	对甲苯酚	
23	46.957	46.910	47.000	37209	0.0021	17835	628-97-7	棕榈酸乙酯	
24	52.581	52.550	52.640	16832	0.0009	5446	544-35-4	亚油酸乙酯	
				1811996358	100.0000	45337349			