
: 2024/10/11 04:36:40 : 65

分析品品 ID 村品品 ID 村居出文件 据始实方文件 大方文件 大文件 大件 D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\3\1\65.qgd D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\65.qgd D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇.qgm D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇.qgm

色谱图 65 D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\3\1\65.qgd

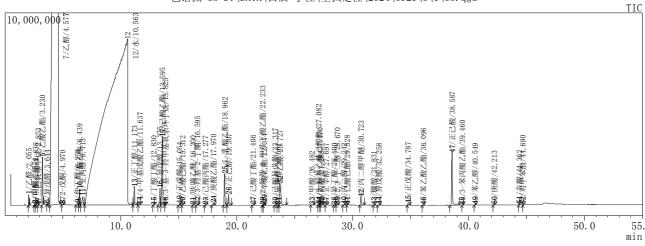

					1.57	m.r.o.		
峰号	保留时间	I.Time	F. Time	峰面积	峰表 峰面积%	TIC 峰高	CAS#	名称
1	2. 055	2. 005	2. 140	1323530	0. 0716	565204	75-07-0	乙醛
2	2. 574	2. 515	2. 610	129224	0.0070	37181	67-64-1	丙酮
3	2. 638	2. 610	2. 700	104000	0.0056	40810	109-94-4	甲酸乙酯
4	2.853	2.810	2.905	46694	0.0025	18756	462-95-3	二乙氧基甲烷
5	3. 230	3. 170	3. 355	9293257	0.5025	2488776	141-78-6	7.酸乙酯
6	3.644	3. 595	3.745	210286	0.0114	57894	590-86-3	异戊醛 乙醇
7	4. 577	3.855	4.805	683739194	36. 9681	24869422	64-17-5	乙醇
8	4. 970	4. 880	5. 090	255414	0. 0138	36304	107-87-9	2-戊酮
9	6. 253	6. 100	6. 340	500897	0. 0271	90716	78-92-2 105-54-4	仲丁醇
10	6. 439 6. 713	6. 340 6. 520	6. 520 6. 860	2811694 2962126	0. 1520 0. 1602	813601 446386	71-23-8	丁酸乙酯 正丙醇
11 12	10. 563	6. 870	11. 045	1083629713	58. 5892	8551465	7732-18-5	水
13	11. 173	11. 045	11. 420	3980677	0. 2152	920419	71-36-3	正丁醇
14	11. 637	11. 475	11. 690	44746	0. 0024	5685	0-00-0	4-甲基戊酸乙酯
15	12. 830	12. 750	12. 885	26408	0.0014	6201	109-21-7	丁酸丁酯
16	13. 375	13. 195	13. 440	3661904	0. 1980	865845	123-51-3	异戊醇
17	13. 595	13.440	13.770	19485332	1.0535	3523271	123-66-0	己酸乙酯
18	13.825	13.770	13.900	29052	0.0016	7121	0-00-0	3-基-3-羟甲基氧杂环丁烷
19	15.054	14. 945	15. 135	250496	0.0135	75276	71-41-0	正戊醇
20	15. 312	15. 250	15. 360	13831	0.0007	5193	142-92-7	乙酸己酯
21	16. 200	16. 150	16. 295	38202	0.0021	10608	65330-49-6	呋喃乙醚 2. 若甚 2. 工程
22 23	16. 595 17. 277	16. 470	16. 720 17. 355	179015 44178	0. 0097 0. 0024	34833 12600	513-86-0 626-77-7	3-羟基-2-丁酮
$\frac{23}{24}$	17. 277	17. 210 17. 820	18. 120	406698	0. 0024	104782	106-30-9	己酸丙酯
$\frac{24}{25}$	18. 962	18.845	19. 145	7130916	0. 0220	1546482	687-47-8	庚酸乙酯 L−乳酸乙酯
26	19. 307	19. 145	19. 545	2082929	0. 1126	472660	111-27-3	正己醇
27	21. 406	21. 305	21. 515	111100	0. 0060	30434	626-82-4	己酸丁酯
28	22. 233	22.170	22. 285	5486	0.0003	3470	2441-06-7	2-羟基-3-甲基丁酸乙酯
29	22.374	22.300	22.475	430673	0.0233	125354	106-32-1	辛酸乙酯
30	23. 317	23. 240	23.400	52105	0.0028	10702	2198-61-0	己酸异戊酯
31	23. 561	23. 470	23.610	24134	0.0013	6171	111-70-6	正庚醇
32	23. 727	23. 645	24. 295	9680267	0. 5234	1157009	64-19-7	乙酸
33	26. 482	26. 385	26. 675	78569	0.0042	10758	64-18-6	甲酸
34 35	27. 082 27. 170	26. 975 27. 135	27. 135 27. 235	144931 105953	0. 0078 0. 0057	37190 24226	25601-36-9 513-85-9	2-羟基乙基己酸酯 2,3-丁二醇
36	27. 170	27. 135	27. 445	88076	0.0037	17922	79-09-4	∠, 3 <sup>−</sup> ∫ —
37	27. 697	27. 635	27. 750	25151	0.0048	7913	111-87-5	丙酸 正辛醇
38	28. 400	28. 330	28. 510	49840	0. 0027	12211	79-31-2	<b>异丁酸</b>
39	28. 670	28. 570	28. 750	66932	0.0036	16908	513-85-9	2.3-丁二醇
40	29. 242	29. 145	29.360	125366	0.0068	26292	57-55-6	丙二醇
41	29. 528	29.470	29.595	65356	0.0035	17202	6378-65-0	己酸己酯
42	30.723	30.620	31.020	1959626	0.1060	426741	107-92-6	丙二醇甲醚
43	31. 831	31. 765	31. 925	24281	0.0013	6467	98-00-0	糠醇
44	32. 258	32. 140	32. 375	119638	0.0065	26953	503-74-2	异戊酸
45	34. 787	34. 695	34. 970	383674	0.0207	79714	109-52-4	正戊酸
46	36. 096	36. 005	36. 175	26826	0. 0015 0. 7191	9219	101-97-3 $142-62-1$	苯乙酸乙酯 正己酸
47 48	38. 587 39. 460	38. 370 39. 425	39. 195 39. 570	13300378 13684	0. 7191	2631477 3373	142-62-1 2021-28-5	止亡敗 3-苯丙酸乙酯
49	40. 549	40. 470	40. 645	75429	0.0007	16873	60-12-8	3-本内版乙酯 苯乙醇
13	10.013	10. 110	10.010	10123	0. 0011	10010	00 12 0	~ <b>□</b> HT

峰号	保留时间	I.Time	F. Time	峰面积	峰面积%	峰高	CAS#	名称
50	42.213	42. 120	42.280	91885	0.0050	25274	111-14-8	庚酸
51	44. 362	44.310	44.405	97065	0.0052	45807	124-07-2	辛酸
52	44.690	44.670	44.720	12153	0.0007	6666	106 - 44 - 5	对甲苯酚
				1849538991	100.0000	50389817		