


分析日期 : 2024/10/11 12:03:13
样品名 : -33
样品 ID :
数据文件 : D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\3\ -33. qgd
原始数据文件 : D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\ -33. qgd
方法文件 : D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇. qgm
原始方法文件 : D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇. qgm
报告文件 :

样品信息

色谱图 -33 D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\3\ -33. qgd

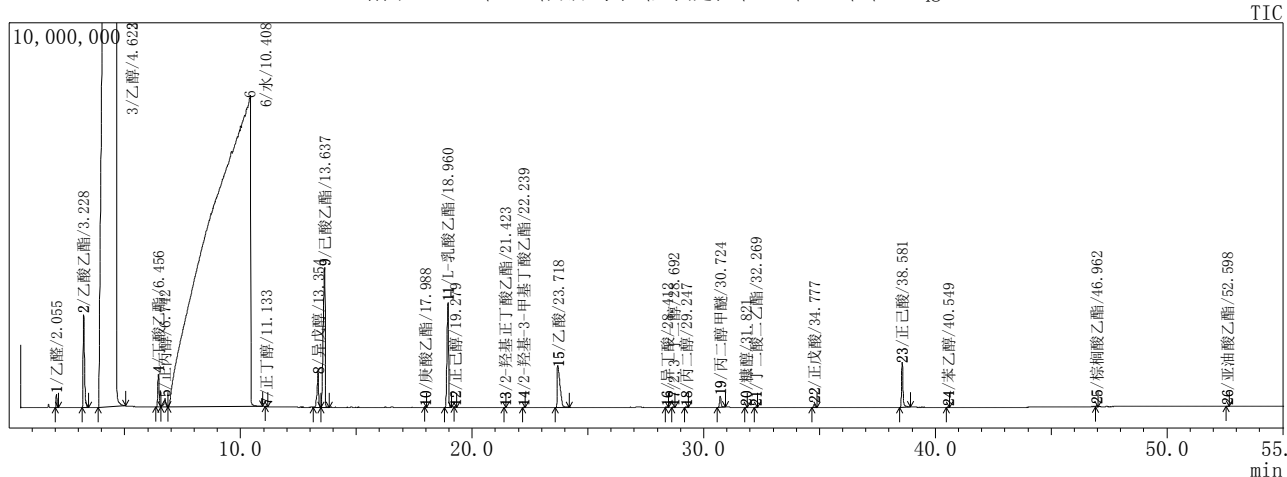

峰表 TIC									
峰号	保留时间	I. Time	F. Time	峰面积	峰面积%	峰高	CAS#	名称	
1	2.055	2.005	2.135	900904	0.0490	341778	75-07-0	乙醛	
2	3.228	3.160	3.435	9795500	0.5333	2406672	141-78-6	乙酸乙酯	
3	4.622	3.855	5.035	799075946	43.5041	26113803	64-17-5	乙醇	
4	6.456	6.355	6.555	3314427	0.1804	845360	105-54-4	丁酸乙酯	
5	6.742	6.555	6.865	1258189	0.0685	220688	71-23-8	正丙醇	
6	10.408	6.865	10.970	968350695	52.7199	7984006	7732-18-5	水	
7	11.133	11.080	11.180	30390	0.0017	9981	71-36-3	正丁醇	
8	13.354	13.145	13.470	3981864	0.2168	797370	123-51-3	异戊醇	
9	13.637	13.470	13.820	20901893	1.1380	3553279	123-66-0	己酸乙酯	
10	17.988	17.940	18.035	19630	0.0011	5826	106-30-9	庚酸乙酯	
11	18.960	18.820	19.120	13070584	0.7116	2712680	687-47-8	L-乳酸乙酯	
12	19.279	19.235	19.340	24261	0.0013	7522	111-27-3	正己醇	
13	21.423	21.380	21.465	10587	0.0006	4090	52089-54-0	2-羟基正丁酸乙酯	
14	22.239	22.190	22.290	19394	0.0011	5872	2441-06-7	2-羟基-3-甲基丁酸乙酯	
15	23.718	23.595	24.195	9081537	0.4944	1060460	64-19-7	乙酸	
16	28.412	28.340	28.470	35165	0.0019	7972	79-31-2	异丁酸	
17	28.692	28.610	28.745	35908	0.0020	8288	513-85-9	2,3-丁二醇	
18	29.247	29.180	29.335	45137	0.0025	9068	57-55-6	丙二醇	
19	30.724	30.595	30.945	1274879	0.0694	282450	107-92-6	丙二醇甲醚	
20	31.821	31.780	31.880	13142	0.0007	4740	98-00-0	糠醇	
21	32.269	32.185	32.320	32321	0.0018	8201	123-25-1	丁二酸二乙酯	
22	34.777	34.685	34.900	342616	0.0187	74983	109-52-4	正戊酸	
23	38.581	38.470	38.920	5054743	0.2752	1032613	142-62-1	正己酸	
24	40.549	40.475	40.610	26907	0.0015	7406	60-12-8	苯乙醇	
25	46.962	46.905	47.015	48795	0.0027	20428	628-97-7	棕榈酸乙酯	
26	52.598	52.550	52.705	39469	0.0021	7705	544-35-4	亚油酸乙酯	
				1836784883	100.0000	47533241			