


分析日期 : 2024/10/10 22:24:50  
样品名 : 60  
样品 ID :  
数据文件 : D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\3\1\60. qgd  
原始数据文件 : D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\60. qgd  
方法文件 : D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇. qgm  
原始方法文件 : D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇. qgm  
报告文件 :

样品信息

色谱图 60 D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\3\1\60. qgd

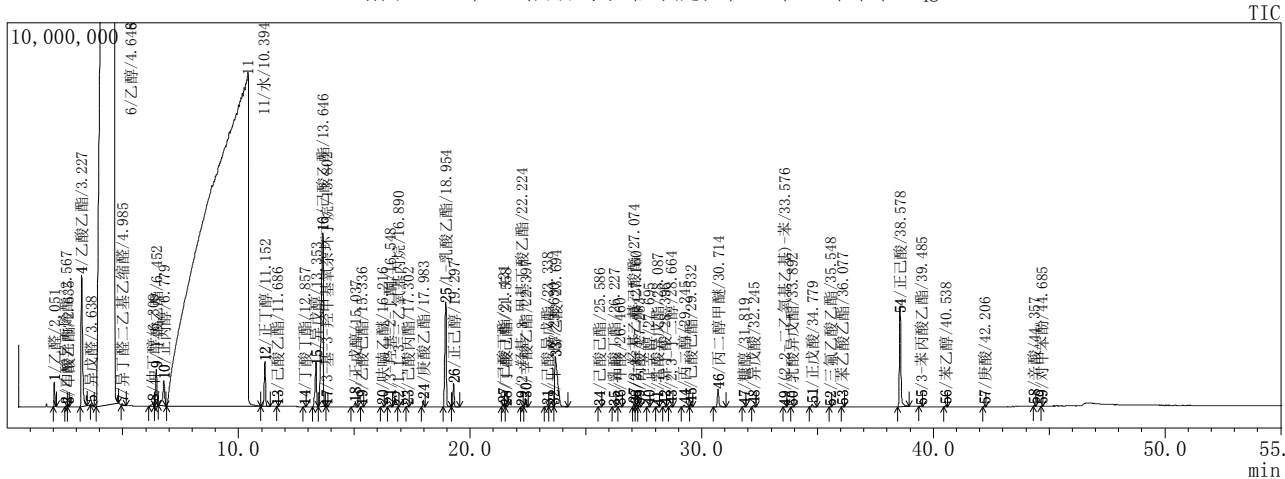

| 峰表 TIC |        |         |         |            |         |          |            |                |  |
|--------|--------|---------|---------|------------|---------|----------|------------|----------------|--|
| 峰号     | 保留时间   | I. Time | F. Time | 峰面积        | 峰面积%    | 峰高       | CAS#       | 名称             |  |
| 1      | 2.051  | 2.005   | 2.145   | 1553894    | 0.0794  | 649826   | 75-07-0    | 乙醛             |  |
| 2      | 2.567  | 2.515   | 2.605   | 99896      | 0.0051  | 30396    | 0-00-0     | 乙酸异丙烯酯         |  |
| 3      | 2.635  | 2.605   | 2.700   | 129181     | 0.0066  | 54734    | 109-94-4   | 甲酸乙酯           |  |
| 4      | 3.227  | 3.160   | 3.460   | 14984034   | 0.7653  | 3420252  | 141-78-6   | 乙酸乙酯           |  |
| 5      | 3.638  | 3.595   | 3.760   | 213477     | 0.0109  | 51156    | 590-86-3   | 异戊醛            |  |
| 6      | 4.648  | 3.860   | 4.835   | 806207145  | 41.1758 | 25788454 | 64-17-5    | 乙醇             |  |
| 7      | 4.985  | 4.935   | 5.145   | 268728     | 0.0137  | 48210    | 1741-41-9  | 异丁醛二乙基缩醛       |  |
| 8      | 6.309  | 6.125   | 6.375   | 563960     | 0.0288  | 111459   | 78-92-2    | 仲丁醇            |  |
| 9      | 6.452  | 6.375   | 6.535   | 3597218    | 0.1837  | 958391   | 105-54-4   | 丁酸乙酯           |  |
| 10     | 6.779  | 6.545   | 6.880   | 3994969    | 0.2040  | 649249   | 71-23-8    | 正丙醇            |  |
| 11     | 10.394 | 6.895   | 10.955  | 1042515943 | 53.2449 | 8559499  | 7732-18-5  | 水              |  |
| 12     | 11.152 | 10.955  | 11.380  | 4627960    | 0.2364  | 1117488  | 71-36-3    | 正丁醇            |  |
| 13     | 11.686 | 11.640  | 11.725  | 11249      | 0.0006  | 4491     | 123-66-0   | 己酸乙酯           |  |
| 14     | 12.857 | 12.795  | 12.920  | 44771      | 0.0023  | 13315    | 109-21-7   | 丁酸丁酯           |  |
| 15     | 13.353 | 13.205  | 13.455  | 5076490    | 0.2593  | 1122484  | 123-51-3   | 异戊醇            |  |
| 16     | 13.646 | 13.455  | 13.755  | 28964790   | 1.4793  | 4432032  | 123-66-0   | 己酸乙酯           |  |
| 17     | 13.802 | 13.765  | 13.850  | 18182      | 0.0009  | 6427     | 0-00-0     | 3-基-3-羟甲基氧杂环丁烷 |  |
| 18     | 15.037 | 14.855  | 15.155  | 389737     | 0.0199  | 94159    | 71-41-0    | 正戊醇            |  |
| 19     | 15.336 | 15.265  | 15.420  | 40466      | 0.0021  | 12162    | 142-92-7   | 乙酸己酯           |  |
| 20     | 16.216 | 16.130  | 16.285  | 45986      | 0.0023  | 12631    | 65330-49-6 | 呋喃乙醚           |  |
| 21     | 16.548 | 16.430  | 16.655  | 237305     | 0.0121  | 43064    | 513-86-0   | 3-羟基-2-丁酮      |  |
| 22     | 16.890 | 16.860  | 16.925  | 15435      | 0.0008  | 6304     | 7789-92-6  | 1,1,3-三氧基丙烷    |  |
| 23     | 17.302 | 17.230  | 17.370  | 77738      | 0.0040  | 22971    | 626-77-7   | 己酸丙酯           |  |
| 24     | 17.983 | 17.905  | 18.050  | 599607     | 0.0306  | 173858   | 106-30-9   | 庚酸乙酯           |  |
| 25     | 18.954 | 18.830  | 19.205  | 12582232   | 0.6426  | 2628659  | 687-47-8   | L-乳酸乙酯         |  |
| 26     | 19.297 | 19.205  | 19.555  | 2348463    | 0.1199  | 560001   | 111-27-3   | 正己醇            |  |
| 27     | 21.421 | 21.345  | 21.500  | 212028     | 0.0108  | 61497    | 626-82-4   | 己酸丁酯           |  |
| 28     | 21.558 | 21.515  | 21.605  | 15878      | 0.0008  | 5890     | 2639-63-6  | 丁酸己酯           |  |
| 29     | 22.224 | 22.185  | 22.280  | 13548      | 0.0007  | 4823     | 2441-06-7  | 2-羟基-3-甲基丁酸乙酯  |  |
| 30     | 22.397 | 22.305  | 22.505  | 779327     | 0.0398  | 197213   | 106-32-1   | 辛酸乙酯           |  |
| 31     | 23.338 | 23.205  | 23.400  | 142482     | 0.0073  | 25194    | 2198-61-0  | 己酸异戊酯          |  |
| 32     | 23.630 | 23.400  | 23.630  | 48266      | 0.0025  | 17116    | 112-42-5   | 十一醇            |  |
| 33     | 23.694 | 23.630  | 24.230  | 11236135   | 0.5739  | 1250584  | 64-19-7    | 乙酸             |  |
| 34     | 25.586 | 25.520  | 25.685  | 28971      | 0.0015  | 8950     | 6378-65-0  | 己酸己酯           |  |
| 35     | 26.227 | 26.135  | 26.285  | 40096      | 0.0020  | 9293     | 138-22-7   | 乳酸丁酯           |  |
| 36     | 26.460 | 26.390  | 26.565  | 73754      | 0.0038  | 13077    | 64-18-6    | 甲酸             |  |
| 37     | 27.074 | 27.005  | 27.120  | 256796     | 0.0131  | 69945    | 25601-36-9 | 2-羟基乙基己酸酯      |  |
| 38     | 27.160 | 27.120  | 27.230  | 182277     | 0.0093  | 37977    | 513-85-9   | 2,3-丁二醇        |  |
| 39     | 27.283 | 27.230  | 27.380  | 106171     | 0.0054  | 22805    | 79-09-4    | 丙酸             |  |
| 40     | 27.695 | 27.635  | 27.755  | 34112      | 0.0017  | 10346    | 111-87-5   | 正辛醇            |  |
| 41     | 28.087 | 28.020  | 28.165  | 35135      | 0.0018  | 8570     | 19329-89-6 | 乳酸异戊酯          |  |
| 42     | 28.396 | 28.325  | 28.480  | 62705      | 0.0032  | 16407    | 79-31-2    | 异丁酸            |  |
| 43     | 28.664 | 28.570  | 28.745  | 92696      | 0.0047  | 23391    | 513-85-9   | 2,3-丁二醇        |  |
| 44     | 29.245 | 29.105  | 29.455  | 264260     | 0.0135  | 43140    | 57-55-6    | 丙二醇            |  |
| 45     | 29.532 | 29.465  | 29.615  | 210645     | 0.0108  | 58491    | 6378-65-0  | 己酸己酯           |  |
| 46     | 30.714 | 30.505  | 31.055  | 2088606    | 0.1067  | 421171   | 107-92-6   | 丙二醇甲醚          |  |
| 47     | 31.819 | 31.745  | 31.910  | 68057      | 0.0035  | 15771    | 98-00-0    | 糠醇             |  |
| 48     | 32.245 | 32.165  | 32.360  | 181920     | 0.0093  | 39665    | 503-74-2   | 异戊酸            |  |
| 49     | 33.576 | 33.515  | 33.685  | 15946      | 0.0008  | 5451     | 6314-97-2  | (2,2-二乙氧基乙基)-苯 |  |

| 峰号 | 保留时间   | I. Time | F. Time | 峰面积        | 峰面积%     | 峰高       | CAS#       | 名称      |
|----|--------|---------|---------|------------|----------|----------|------------|---------|
| 50 | 33.892 | 33.845  | 33.970  | 21635      | 0.0011   | 5587     | 19329-89-6 | 乳酸异戊酯   |
| 51 | 34.779 | 34.655  | 34.980  | 341127     | 0.0174   | 71760    | 109-52-4   | 正戊酸     |
| 52 | 35.548 | 35.500  | 35.615  | 23743      | 0.0012   | 6467     | 63169-61-9 | 三氟乙酸乙酯  |
| 53 | 36.077 | 36.015  | 36.170  | 54790      | 0.0028   | 14865    | 101-97-3   | 苯乙酸乙酯   |
| 54 | 38.578 | 38.455  | 38.955  | 11786933   | 0.6020   | 2533328  | 142-62-1   | 正己酸     |
| 55 | 39.485 | 39.380  | 39.535  | 22017      | 0.0011   | 6241     | 2021-28-5  | 3-苯丙酸乙酯 |
| 56 | 40.538 | 40.460  | 40.620  | 123870     | 0.0063   | 30883    | 60-12-8    | 苯乙醇     |
| 57 | 42.206 | 42.135  | 42.275  | 75690      | 0.0039   | 22303    | 111-14-8   | 庚酸      |
| 58 | 44.357 | 44.310  | 44.425  | 88465      | 0.0045   | 40151    | 124-07-2   | 辛酸      |
| 59 | 44.685 | 44.640  | 44.720  | 28077      | 0.0014   | 13670    | 106-44-5   | 对甲苯酚    |
|    |        |         |         | 1957965014 | 100.0000 | 55683694 |            |         |