
样品信息

: 2024/10/08 14:56:14 : 31

: D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\2\31.qgd : D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\31.qgd : D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇.qgm : D:\DATA\白酒-手性\method\酒-Scan-240912-乙醇.qgm

色谱图 31 D:\DATA\白酒-手性\全扫定性\2024\0929\2\31.qgd

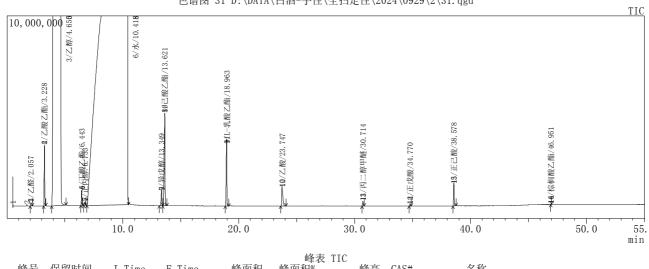

			峰表 TIC					
峰号	保留时间	I.Time	F. Time	峰面积	峰面积%	峰高	CAS#	名称
1	2.057	2.015	2.205	883472	0.0280	168968	75-07-0	乙醛
2	3. 228	3. 165	3.360	10551908	0.3348	3166602	141 - 78 - 6	乙酸乙酯
3	4.650	3.865	5. 100	1073941319	34.0795	29522457	64 - 17 - 5	乙醇
4	6. 443	6.370	6.535	2588986	0.0822	795050	105-54-4	丁酸乙酯
5	6.733	6.625	6.825	818985	0.0260	176445	71-23-8	正丙醇
6	10.418	6.895	10.480	2007324886	63. 6987	13036723	7732-18-5	水
7	13. 349	13. 150	13.450	3422855	0. 1086	793045	123-51-3	异戊醇
8	13.621	13.450	13.800	24285287	0.7706	4613395	123-66-0	己酸乙酯
9	18.963	18.825	19. 150	14370760	0.4560	3065644	687-47-8	L-乳酸乙酯
10	23.747	23.625	24.075	6925204	0.2198	995474	64 - 19 - 7	乙酸
11	30.714	30.640	30.830	985407	0.0313	241716	107-92-6	丙二醇甲醚
12	34.770	34.690	34.880	319273	0.0101	79694	109 - 52 - 4	正戊酸
13	38. 578	38.475	38.750	4827305	0.1532	1160482	142-62-1	正己酸
14	46.951	46.905	46.985	33159	0.0011	14918	628-97-7	棕榈酸乙酯
				3151278806	100,0000	57830613		